


REVYLINЕ

RL 850

Ирригатор для полости рта портативный

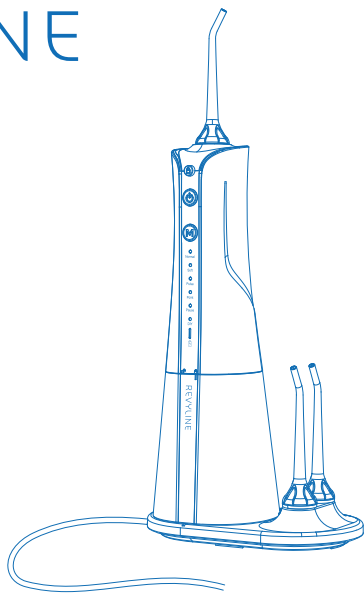

Благодарим вас за приобретение портативного ирригатора для полости рта Revyline RL 850. Использование ирригатора существенно повышает уровень гигиенической защиты полости рта, предотвращает возникновение и развитие стоматологических заболеваний. Пульсирующий водный поток стимулирует кровоснабжение в деснах и улучшает их состояние. Сочетание высокого давления и пульсирующей технологии подачи воды помогает ирригатору Revyline RL 850 очищать межзубные промежутки, пришеечную область зубов и десневую борозду, что недоступно для обычной зубной щетки.

Меры предосторожности

Перед первым применением ирригатора Revyline RL 850 внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и сохраните ее.

Для предотвращения электротравм, ожогов, пожаров:

1. Не опускайте прибор в воду или другую жидкость.
2. Не используйте ирригатор во время принятия душа.
3. Не трогайте влажными руками зарядное устройство, подключенное к электросети.
4. Не храните прибор в местах, откуда он может упасть в емкость с водой или раковину.
5. Не используйте прибор при неисправности зарядного устройства или повреждении силового кабеля.
6. Не направляйте поток воды под язык, в уши, нос или другие чувствительные участки. Прибор генерирует мощную водную струю, которая может нарушить целостность кожи и слизистых оболочек.
7. Используйте только фирменные насадки и аксессуары.
8. Не вставляйте посторонние предметы в гнездо для сменной насадки.
9. Заряжайте прибор вдали от горячих поверхностей.
10. Проверьте USB-кабель на предмет повреждения до и после использования прибора.
11. Не разбирайте прибор и не занимайтесь его ремонтом самостоятельно.
12. Не включайте ирригатор в помещении, где ранее использовался кислород или аэрозоли.
13. Не заливайте в резервуар ополаскивателя, содержащие йод, масло, отбеливающие ингредиенты. Они снижают эффективность и срок службы прибора.
14. Заливайте в резервуар воду или раствор, рекомендованный лечащим врачом-стоматологом.
15. Перед использованием ирригатора удалите из полости рта все съемные конструкции.
16. Не используйте прибор при наличии ранок в полости рта или на языке.
17. Если вы принимаете антибиотики непосредственно перед проведением профессиональной гигиены полости рта, проконсультируйтесь с лечащим врачом перед первым применением ирригатора или других средств по уходу за полостью рта.
18. Использование ирригатора детьми возможно только под присмотром взрослых.

Зарядка аккумулятора

В боковой разъем, расположенный на корпусе прибора, вставьте USB-кабель. Зарядку аккумулятора можно проводить от любого электронного устройства, имеющего USB-порт, либо через зарядное устройство с USB-портом, работающее от бытовой сети переменного тока. Во время зарядки индикатор зарядки горит красным цветом и медленно мигает. При полной зарядке индикатор зарядки будет оставаться зеленым до тех пор, пока зарядное устройство не будет извлечено.

Внимание! Перед первым использованием ирригатор следует заряжать в течение восьми часов. Во время зарядки аккумулятора пользоваться устройством нельзя.

Проверка уровня заряда аккумулятора

Когда прибор находится в режиме ожидания, нажмите и удерживайте кнопку выбора режима.

Если заряд аккумулятора составляет более 83%, будут гореть 6 индикаторов, расположенных на корпусе ирригатора;

- 83%-67% - 5 индикаторов;
- 66%-51% - 4 индикатора;
- 50%-35% - 3 индикатора;
- 34%-19% - 2 индикатора;
- 19% и менее - 1 индикатор.

(Чем больше индикаторов горит от основания до вершины шкалы, тем выше заряд. Если вы хотите уточнить результат, повторите действие).

Включение прибора

Откройте крышку резервуара, наклоните корпус так, чтобы входное отверстие было в горизонтальном положении и перпендикулярно направлению струи. Наполните резервуар кипяченой очищенной водой. Закройте крышку резервуара.

Резервуар для жидкости у ирригатора Revyline RL 850 съемный, также для заполнения водой можно воспользоваться отверстием сверху, отсоединив резервуар от корпуса.

Для включения прибора один раз нажмите кнопку MODE для «пробуждения» прибора и далее кнопку включения питания ON/OFF, прибор включится с последним выбранным режимом. Для выбора необходимого режима работы прибора используйте кнопку MODE. Для выключения ирригатора нажмите один раз на кнопку ON/OFF.

Выбор режима работы

Прибор может работать в шести режимах. Активация и выбор режима осуществляется кнопкой MODE, что подтверждается включением соответствующего светового индикатора на ручке устройства. После включения ирригатор будет работать в том режиме, какой использовался последним перед отключением устройства.

NORMAL (Нормальный)

Стандартный режим для ежедневной гигиены полости рта позволяет эффективно удалить микрочастицы пищи из межзубных промежутков, глубоко очистить зубы, сохранить свежесть дыхания надолго.

SOFT (Мягкий)

Этот режим рекомендуется людям, страдающим повышенной чувствительностью зубов, при воспалении десен.

PULSE (Пульсирующий)

Каждый импульс воды сопровождается изменением давления. Режим рекомендован для проведения гидромассажа десен, который благотворно влияет на кровоснабжение тканей.

POINT (Точечный)

Струя воды подается тремя импульсами с временными интервалами для перехода от чистки одного межзубного промежутка к другому. Режим позволяет экономно расходовать рабочую жидкость. Рекомендуется при использовании растворов на основе лечебных бальзамов.


PAUSE (Пауза)

При использовании этого режима подача воды осуществляется удержанием кнопки ON/OFF.

DIY (Программируемый)

Позволяет выбрать интенсивность работы ирригатора в соответствии с личными предпочтениями, установить необходимый уровень давления жидкости.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

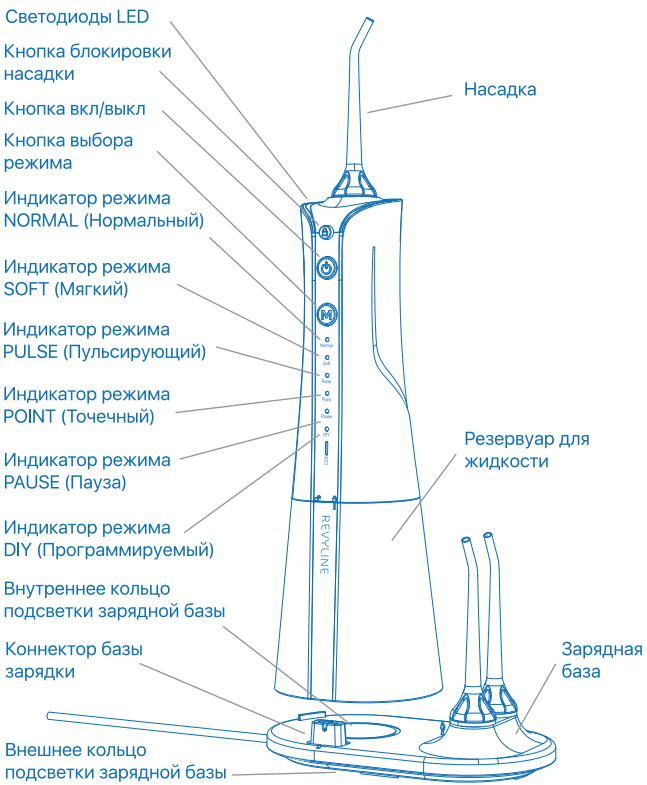

Выбрав этот режим, нажмите кнопку ON/OFF. Давление воды будет изменяться от минимального к максимальному. Отпустите кнопку ON/OFF в тот момент, когда уровень давления жидкости будет для вас оптимальным. Система запомнила выбранную вами настройку и сохранит её до следующей регулировки.

Внимание! В начале применения прибора рекомендуется использовать режим SOFT. Это поможет адаптироваться к ирригационной чистке и избежать риска появления воспаления и кровоточивости десен.

Установка и замена насадки

Установите насадку в разъем, расположенный на верхней части ирригатора и, надавливая, вставьте её до щелчка. Для удаления насадки удерживайте нажатой кнопку блокировки и извлеките насадку из корпуса прибора. Внимание! Не нажимайте кнопку извлечения насадки во время работы устройства.

Режим ирригации

Расположите насадку под углом 45 градусов к поверхности зуба. Включите ирригатор, направьте водную струю на область чистки. Вода должна естественным образом стекать из полости рта в раковину. Для получения лучших результатов вначале обработайте область боковых зубов, а затем передних. Продвигайте насадку вдоль контура десны, задерживая ее в межзубных промежутках.

Использование ополаскивателей и растворов

Для лучшего эффекта рекомендуется использовать ополаскиватели и специализированные бальзамы Revyline. Расчет дозировки производится согласно инструкции используемого средства. После каждого использования растворов необходимо промыть ирригатор.

Внимание! В состав некоторых ополаскивателей для полости рта входит спирт, который при длительном нахождении в системе прибора может повредить его детали и, в конечном итоге, снизить срок его эксплуатации.

Уход и обслуживание

Не погружайте устройство в воду. Запрещено хранить жидкость в резервуаре. Используйте мягкую ткань и мягкий неабразивный очиститель для очистки поверхности прибора. Для облегчения чистки резервуара его необходимо отсоединить от корпуса. При регулярном использовании жесткой воды на деталях прибора могут образовываться известковые отложения. Для их ликвидации используйте специальное средство Revyline для очистки ирригатора, согласно инструкции по его применению. Производитель рекомендует проводить чистку ирригатора от одного до трех раз в три месяца в зависимости от жесткости воды. Чтобы избежать травм или несчастных случаев, связанных с работой прибора, используйте только штатные детали и аксессуары, предусмотренные заводом-изготовителем.

Насадки в комплекте

В базовой комплектации прибора две стандартные сменные насадки. Они имеют кольца различных цветов, что позволяет идентифицировать насадки для каждого пользователя. После 3-6 месяцев регулярного использования насадка изнашивается и теряет эффективность. В этом случае ее необходимо заменить.

Внимание! Насадка должна быть строго индивидуальной. Совместное использование одной насадки различными пользователями не рекомендуется.

Гарантия

Гарантия на прибор 2 года.

Гарантированное техническое обслуживание прибора осуществляется в течение действующего гарантийного срока бесплатно. Далее обслуживание ирригатора осуществляется за счет покупателя.

Гарантия не распространяется:

- на расходные материалы и комплектующие.
- на товары, которые вышли из строя и/или получили дефекты вследствие применения их не по назначению; неосторожного и/или небрежного использования (включая перегрузку), приведшего к повреждениям, модификации, вскрытия и/или ремонта неуполномоченной организацией (частным лицом), нарушением правил эксплуатации, и/или хранения, и/или транспортировки указанным в руководстве по эксплуатации.
- на товары, которые вышли из строя и/или получили дефекты вследствие подключения к неправильному источнику питания.
- на товары, эксплуатировавшиеся с неустраненными недостатками.
- на неисправности, которые вызваны независимыми от производителя причинами, такими как действия третьих лиц, явления природы и стихийные бедствия, домашние и дикие животные, насекомые, попадание внутрь товаров посторонних предметов и жидкостей.
- на внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, потертости и прочие механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации и в результате естественного износа.

Распространенные проблемы и их решение

Не извлекается насадка.

Решение: Во время извлечения насадки нажмите и удерживайте кнопку высвобождения насадки, расположенную на корпусе прибора.

Сложности выбора уровня напора струи.

Решение: После включения прибора выберите необходимый режим работы прибора. Для повышения эффективности ирригации используйте режим, не причиняющий вам дискомфорта. При воспаленных и слабых деснах используйте пародонтальную насадку.

Кровоточивость во время ирригации.

Решение: Кровоточивость является характерным симптомом воспаления десен. Не волнуйтесь. Прежде всего, необходимо выбрать режим работы ирригатора SOFT. Ирригатор удаляет зубной налет и бактерии из десен. При дальнейшем использовании кровоточивость прекратится.

Как предотвратить разбрызгивание воды?

Решение: Во время ирригации не стойте вертикально прямо с широко открытым ртом. Наклонитесь по направлению к раковине, приоткройте рот. Вода будет естественным образом выливаться из полости рта.

Комплектация

- Основной блок ирригатора Revyline RL 850;
- Стандартная насадка – 2 шт.;
- Резервуар;
- Зарядная база;
- Дорожный чехол;
- Сетевой адаптер;
- USB кабель;
- Инструкция по эксплуатации.

ИРРИГАТОР ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА ПОРТАТИВНЫЙ REVYLINЕ

Модель: RL 850.

Предназначен для профилактики болезней зубов и десен.

Уровень давления воды: от 210 до 840 кПа.

Частота пульсации: 1 400 – 1 800 в мин.

Ёмкость резервуара: 300 мл.

Влагозащита корпуса: IPX7.

Материал корпуса: ABS.

Питание: литиевая перезаряжаемая батарея 2 000 mAh.

Потребляемая мощность: 10 Вт.

Товар не имеет срока годности.

Средний срок службы: 5 лет.

Гарантия: 2 года.

Хранить при комнатной температуре.

Произведено по заказу ИП Паршунина С. Г., Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Карла Маркса, 425, вл. 27.

Изготовлено: Shenzhen Yuxinyuan Electronic Technology Co., Ltd. 301, No.2 Hualangjia Industrial Park, No.28 Tongfuyu Industrial Area, Kukeng Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen, China.

Если у вас остались вопросы, обратитесь в сервисный центр.

8 (800) 775-38-49

www.revyline.ru

Гарантийный талон

Название организации.....

Дата продажи

Место для печати