



DENT
GEO SOFT

ESTUS

РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС
«ESTUS»

АО «Геософт Дент»
(Россия)



СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	4
2. Комплект поставки	5
3. Подготовка к работе	7
4. Работа эндодонтического мотора ESTUS DRIVE с ESTUS MULTI (Plus).....	8
5. Работа плагера ESTUS PACK с ESTUS MULTI (Plus).....	21
6. Работа инжектора ESTUS FILL с ESTUS MULTI (Plus)....	24
7. Работа пульпестера ESTUS PULP с ESTUS MULTI (Plus)..	27
8. Работа фотоактиватора (лампы) ESTUS LIGHT с ESTUS MULTI (Plus).....	29
9. Работа эндоскалера ESTUS SONIC с ESTUS MULTI (Plus)	34
10. Работа апекслокатора ESTUS APEX с ESTUS MULTI (Plus).....	37
11. Сохранение параметров настройки.....	38

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Стоматологический комплекс «Estus» предназначен для проведения процедур в области стоматологии и состоит из следующих отдельных изделий и систем:

- Система эндодонтическая для препарирования и очистки корневых каналов зуба «Estus Drive»,
 - Система для трехмерной obturation корневых каналов зуба разогретой гуттаперчей «Estus Pack-Fill»,
 - Аппарат для электроодонтодиагностики пульпы зуба «Estus Pulp»,
 - Фотоактиватор стоматологический «Estus Light»,
 - Эндодонтический ультразвуковой скалер «Estus Sonic»,
 - Аппарат для локализации апикального сужения корневого канала зуба «Estus Apex»,
- связанных по радиоканалу с общим блоком управления «Estus Multi (Plus)».

Благодаря связи с блоком управления «Estus Multi (Plus)» появляется возможность расширения

функционала выше перечисленных изделий, упрощается процесс их настройки и реализуется более наглядная индикация их рабочих параметров. Прием-передача данных между «Estus Multi (Plus)» и другими аппаратами стоматологического комплекса «Estus» осуществляется по радиоканалу.



2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки изделия представлен в таблице 1
Таблица 1

	Наименование	Кол-во , шт
1	Апекслокатор- Блок управления «Estus Multi (Plus)» в составе:	1
1.1	Апекслокатор -Блок управления «Estus Multi(Plus)»	1
1.2	Кабель «Signal Line» (USBВ-разъем)	1*
1.3	Тестер апекслокатора	1*
1.4	Щуп-зажим «Probe Princh»	1*
1.5	Загубник «Oral Hook»	1*
1.6	Кабель зарядки USB-A - USB-B	1*
1.7	Блок питания (USB-разъем) 2А	1*
1.8	Руководство по эксплуатации «Estus Multi (Plus)»	1
1.9	Руководство по эксплуатации «Estus»	1
2	Система эндодонтическая для препарирования и очистки корневых каналов зуба «Estus Drive» в составе: <i>см. Комплекточную ведомость</i>	При необходимости
3	Система для трехмерной obturation корневых каналов зуба разогретой гуттаперчей «Estus Pack-Fill» в составе: <i>см. Комплекточную ведомость</i>	При необходимости

Продолжение Таблицы 1

	Наименование	Кол-во , шт
4	Аппарат для электроодонтодиагностики пульпы зуба «Estus Pulp» в составе: см. <i>Комплектовочную ведомость</i>	При необходимости
5	Фотоактиватор стоматологический “Estus Light» в составе: <i>см. Комплектовочную ведомость</i>	При необходимости
6	Аппарат для локализации апикального сужения корневого канала зуба «Estus Apex» в составе: <i>см. Комплектовочную ведомость</i>	При необходимости
7	Эндодонтический ультразвуковой скалер «Estus Sonic» в составе: <i>см. Комплектовочную ведомость</i>	При необходимости
8	Подставка «Estus Two-B»	1
9	Зарядная станция «Estus Energy-D»	1
10	Кабель зарядки USB-A-USB-B	1
11	Блок питания (USB-разъем) 2А	1
12	Гарантийный талон «Estus»	1
13	Упаковка «Estus»	1

3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Для беспроводного взаимодействия аппаратов стоматологического комплекса «Estus» по радиоканалу с блоком управления «Estus Multi (Plus)», необходимо предварительно создать с этими аппаратами пару.

Подробный процесс создания пары описан в Руководстве по эксплуатации для аппарата «Estus Multi (Plus)» (*Шаг 12 / п. 12.2. Настройка «Создание/Удаление пары»*).


После создания пары иконка сопряженного аппарата на экране «Estus Multi (Plus)» меняет **СЕРЫЙ** цвет на **МЯТНЫЙ**, а при включении питания данного аппарата - на **СИРЕНЕВЫЙ**.

4. РАБОТА ЭНДОДОНТИЧЕСКОГО МОТОРА «ESTUS DRIVE» С «ESTUS MULTI (PLUS)»


Шаг 1. Активация режима «ENDOMOTOR» на Estus Multi

Шаг 1.1. Ручная активация

А) Нажмите на иконку «ENDOMOTOR» (ЭНДОМОТОР) в главном меню «ESTUS MULTI»

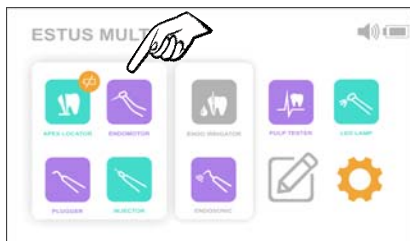

Б) Нажмите на окно «HEAD» (ГОЛОВКА) и в раскрывшемся списке выберите нужный рабочий режим, соответствующий типу подсоединяемой головки к наконечнику «ESTUS DRIVE» - RT, SAF или GF

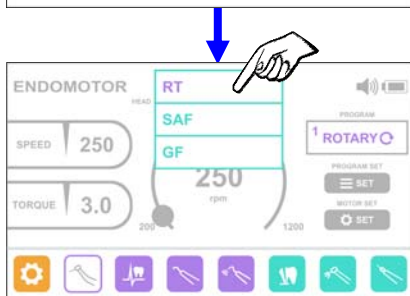

Шаг 1.2. Автоматическая активация

Установите рабочую головку в разъем наконечника «Estus Drive» и нажмите на кольцевую кнопку наконечника. На экране «ESTUS MULTI» автоматически активируется режим эндомотора, соответствующий установленной головке.


Шаг 2. Работа с головкой «RT».

Шаг 2.1. Редактирование рабочей последовательности файлов

В данной настройке возможно выбрать и запомнить последовательность их пяти любых файлов.




А) Для открытия окна редактирования файлов нажмите на кнопку «PROGRAM SET» (НАСТРОЙКИ ПРОГРАММЫ).

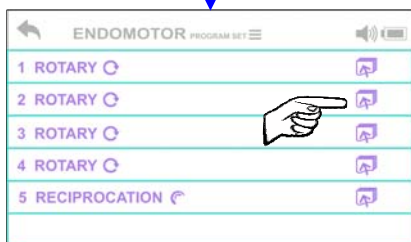

По умолчанию на экране будет отображаться список файлов, сохраненных в памяти концевика «Estus Drive»


Б) Для изменения типа текущего файла и/или его параметров нажмите на иконку справа

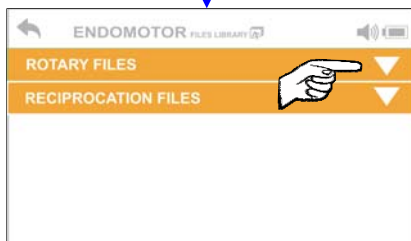


В) В открывшейся Библиотеке файлов «FILES LIBRARY» выберите нужный файл, двигаясь по цепочке:

тип файла >
(например, ROTARY FILES)

> **фирма-производитель** >
(например, *DENTSPLY MAILLEFER*)

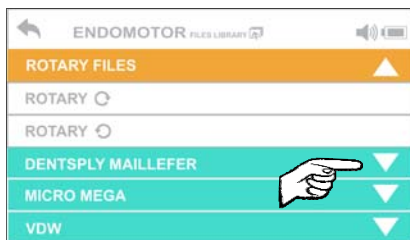


> **название системы** >
(например, *PROTAPER NEXT*)

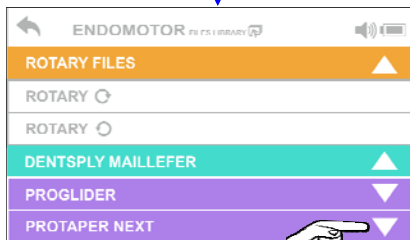

и

> **обозначение файла**
(например, *PT Next X1*)

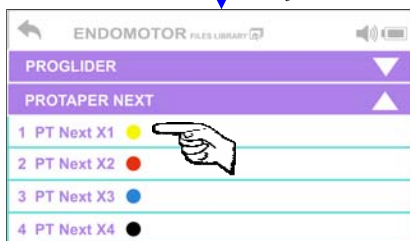

где:

ROTARY ⌚ - любой Rotary файл, вращающийся по ч.с.

ROTARY ⌚ - любой Rotary файл, вращающийся против ч.с.

RECIPROCATION ⌚ - любой Reciprocation файл



Г) Для выхода из окна редактирования после внесения всех нужных изменений, нажмите на стрелочку в верхнем левом углу экрана



Шаг 2.2. Выбор рабочего файла

Нажмите на окно «PROGRAM» (ПРОГРАММА) и в раскрывшемся списке выберите один из пяти рабочих файлов.


После нажатия на строку с обозначением файла, параметры, загруженные для этого файла из библиотеки (скорость и предельный момент (торк) для Rotary файлов или угол вращения по- и против часовой стрелки для Reciprocation файлов) автоматически отобразятся в основном окне программы.

Шаг 2.3. Регулировка скорости вращения ROTARY-файлов



Для изменения текущего значения скорости нажмите на кнопку «SPEED» (СКОРОСТЬ) и с помощью кругового регулятора установите требуемое значение

скорости в пределах от 200 до 1200 об/мин с шагом 50/100 об/мин


 Максимально допустимое значение скорости вращения файла зависит от заданного для него предельного крутящего момента (см. Шаг 2.4). Максимальные значения скорости при заданном моменте указаны в таблице ниже:


Заданный момент, Нсм	<=3,0	3,1-3,2	3,3-3,5	3,6-3,7	3,8-4,0	4,1-4,2	4,3-4,5	4,6-4,8	4,9-5,1
Макс. скорость, об/мин	1200	1100	1000	900	800	700	600	500	400

Для безопасного препарирования корневого канала, при увеличении скорости выше максимально допустимого значения, автоматически будет уменьшаться заданное значение предельного момента.

Шаг 2.4. Регулировка предельного крутящего момента (торка) для ROTARY-файлов

Для изменения текущего значения момента нажмите на кнопку «TORQUE» (МОМЕНТ) и с помощью кругового регулятора установите требуемое значение момента в пределах от 0,2 до 5,1 Нсм с шагом 0,1 Нсм

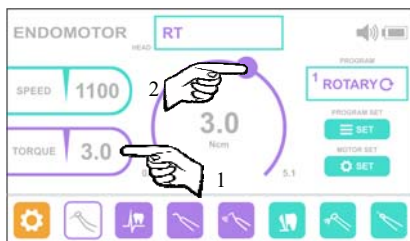





 Максимально допустимое значение предельного момента зависит от заданной для него скорости вращения (см. Шаг 2.3). Максимальные значения момента при заданной скорости указаны в таблице далее:


Заданная скорость, об/мин	<=400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
Макс. момент, Нсм	5,1	4,8	4,5	4,2	4,0	3,7	3,5	3,2	3,0

Для безопасного препарирования корневого канала, при увеличении момента выше максимально допустимого значения, автоматически будет уменьшаться заданное значение скорости.

! При выборе скорости и предельного момента вращения файла руководствуйтесь рекомендациями производителя Ni-Ti инструмента. Во избежание поломки инструмента в процессе прохождения канала, ни в коем случае не устанавливайте значение скорости и/или момента на дисплее выше значения, рекомендованного производителем.

Шаг 2.5. Регулировка угла вращения ПО– и ПРОТИВ часовой стрелки для RECIPROICATION-файлов

Для изменения текущего значения угла вращения файла ПО– или ПРОТИВ часовой стрелки нажмите на кнопку «ANGLE » (УГОЛ ) или «ANGLE » (УГОЛ ) соответственно

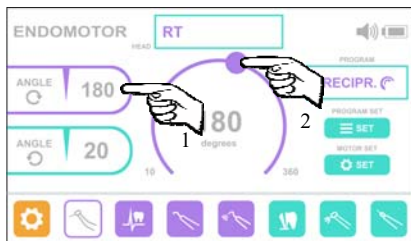

и с помощью кругового регулятора установите требуемое значение угла в пределах от 10 до 360° (с шагом 10°)




Углы вращения файлов ПО– и ПРОТИВ часовой стрелки не могут иметь одинаковые значения. Установка одинаковых значений углов блокируется программно.

Шаг 2.6. Общие настройки эндомотора

А) Нажмите на кнопку «MOTOR SET» (НАСТРОЙКИ МОТОРА) для открытия окна настроек эндомотора



Б) Для изменения текущего состояния/значения настройки используйте стрелки «влево»- «вправо» напротив редактируемого параметра

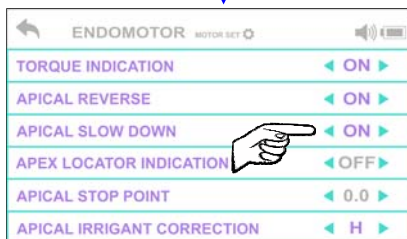

Описание настроек:

- **TORQUE INDICATION (ИНДИКАЦИЯ МОМЕНТА)** - вкл/откл. индикации текущего крутящего момента на светодиодной линейке наконечника «Estus Drive» во время вращения мотора.
- **APICAL REVERSE (АПИКАЛЬНЫЙ РЕВЕРС)** - вкл/откл. функции апикального реверса при достижении заданной локализуемой точки в канале зуба (апекса или установленной точки упора) во время одновременной работы мотора со встроенным апекслокатором.

- **APICAL SLOW DOWN (АПИКАЛЬНОЕ ЗАМЕДЛЕНИЕ)** - вкл/откл. функции замедления вращения мотора при приближении к заданной локализуемой точке в канале зуба (к апексу или к установленной точке упора) во время одновременной работы мотора со встроенным апекслокатором.
- **AREX LOCATOR INDICATION (ИНДИКАЦИЯ АПЕКСЛОКАТОРА)** - вкл/откл. индикации текущего расстояния до точки апекса на светодиодной линейке наконечника «Estus Drive» во время одновременной работы мотора со встроенным апекслокатором.
- **APICAL STOP POINT (АПИКАЛЬНЫЙ УПОР)**– установка апикального упора (смещение локализуемой точки в канале зуба во время одновременной работы мотора со встроенным апекслокатором), где значение 0.0 соответствует точке апекса, а значения от 0.1 до 1.0 - величине апикального упора
- **APICAL IRRIGANT CORRECTION (ИРРИГАНТ В АПЕКСЛОКАТОРЕ)** - вкл/откл. функции коррекции измерений встроенного апекслокатора в зависимости от используемого ирригационного раствора в канале зуба во время одновременной работы мотора со встроенным апекслокатором, где: «Н» - гипохлорит натрия, «С» - хлоргексидин, «Е» - ЭДТА и «OFF» - функция отключена



Использование функции коррекции позволяет повысить точность измерения в зависимости от используемого вида ирриганта- гипохлорита натрия, ЭДТА или хлоргексидина.

Шаг 2.7. Индикация в режиме вращения мотора с головкой «RT»

При работе с головкой «RT» во время вращения мотора на экране «Estus Multi» отображается:

1. текущее значение крутящего момента, если используется файл непрерывного вращения (ROTARY), цепь апекслокатора НЕ замкнута и функция **TORQUE INDICATION** не отключена (см. Шаг 2.6)

Или

2. текущее расстояние до апекса, если цепь апекслокатора замкнута и функция **APEX LOCATOR INDICATION** не отключена (см. Шаг 2.6)

или

3. текущее время с момента запуска мотора, если обе функции **TORQUE INDICATION** и **APEX LOCATOR INDICATION** отключены (см. Шаг 2.6)



Шаг 3. Работа с головкой «SAF».

Шаг 3.1. Регулировка скорости вращения мотора


Для изменения текущего значения скорости нажмите на кнопку



«**SPEED**» (**СКОРОСТЬ**) и с помощью кругового регулятора установите требуемое значение скорости в пределах от 3500 до 9500 об/мин с шагом 500 об/мин

Шаг 3.2. Регулировка скорости подачи ирригационного раствора (производительности помпы)

Для изменения текущего значения скорости нажмите на кнопку

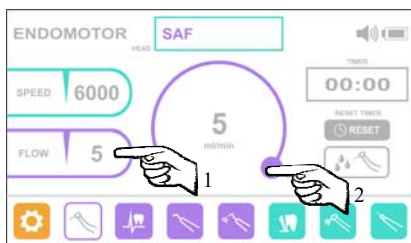

«**FLOW**» (**СКОРОСТЬ ПОТОКА**) и с помощью кругового регулятора установите требуемое значение скорости в пределах от 1 до 5 мл/мин с шагом 1 мл/мин



Шаг 3.3. Сброс (обнуление) таймера

Для сброса таймера нажмите на кнопку «**TIMER RESET**» (**СБРОСИТЬ ТАЙМЕР**).

При этом значение времени в окне «TIMER» (ТАЙМЕР) станет равным 00:00

Шаг 3.4. Индикатор состояния помпы



Индикатор состояния помпы «Estus Pump»:



- помпа вкл.



- помпа выкл.



*Запуск мотора в режиме «SAF» невозможен без подключенной помпы «Estus Pump». Перед запуском мотора убедитесь, что индикатор состояния помпы активен (индикатор должен быть **МЯТНОГО** цвета)*

Шаг 3.5. Индикация в режиме вращения мотора с головкой «SAF»

При работе с головкой «SAF» во время вращения мотора на экране «Estus Multi» отображается текущее время вращения мотора с момента последнего обнуления таймера (см. Шаг 3.3)



Шаг 4. Работа с головкой «GF».

Шаг 4.1. Выбор рабочего файла

Нажмите на окно «PROGRAM» (ПРОГРАММА) и в раскрывшемся списке выберите один из двух рабочих файлов.



Шаг 4.2. Регулировка скорости вращения мотора





Для изменения текущего значения скорости используйте круговой регулятор. Установите требуемое значение скорости в пределах от 3000 до 9000 об/мин с шагом 500 об/мин

Шаг 4.3. Индикация в режиме вращения мотора с головкой «GF»

При работе с головкой «GF» во время вращения мотора на экране «Estus Multi» отображается текущее время вращения мотора с момента его запуска.



Шаг 5. Предупреждающие индикаторы


Индикатор	Причина индикации	Действия
	Предупреждение о неудачной автокалибровке системы микромотора	Запустите мотор повторно. Если «капля» снова индицируется, смажьте или замените головку. Если не помогло, обращайтесь в службу сервиса
	Нарушена целостность измерительной цепи апекслокатора.	См. Таблицу «Поиск и устранение неисправностей при нарушении целостности измерительной цепи встроенного апекслокатора» в Руководстве по эксплуатации для эндодонтического мотора «Estus Drive»

5. РАБОТА ПЛАГГЕРА «ESTUS PACK» С «ESTUS MULTI (PLUS)»

Шаг 1. Активация режима «PLUGGER» на Estus Multi


Шаг 1.1. Ручная активация

Нажмите на иконку «PLUGGER» (ПЛАГГЕР) в главном меню «ESTUS MULTI»

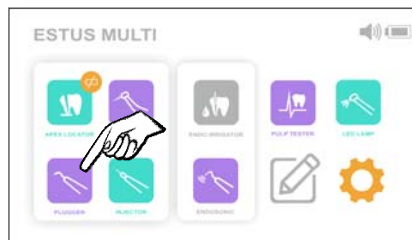

Шаг 1.2. Автоматическая активация


Нажмите на кольцевую кнопку наконечника «Estus Pack». На экране «ESTUS MULTI» автоматически активируется рабочий режим термоплаггера.

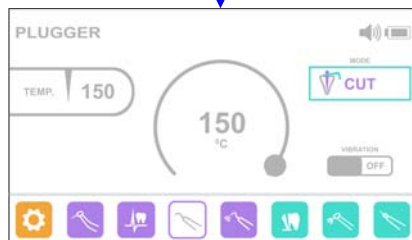

Шаг 2. Выбор рабочего режима



Нажмите на окно «MODE» (РЕЖИМ) и в раскрывшемся списке выберите один из трех рабочих режимов: «CUT», «PACK», «MIX».

Для активации режима «РАСК+» (с вибрацией), находясь в




основном режиме «РАСК» переведите переключатель VIBRATION (ВИБРАЦИЯ) в положение «ON», для возврата к режиму «РАСК» (без вибрации) - в положение «OFF»

Режимы «CUT» и «MIX» полностью соответствуют режимам работы термоплаггера «CUT» и «MIX» при его автономной работе (*подробнее см. Руководство по эксплуатации для «Estus Pack-Fill»*). Изменение рабочих параметров в данных режимах НЕВОЗМОЖНО.

В режимах «РАСК» (с вибрацией и без) пользователь может изменить рабочую температуру термоплаггера.

Шаг 3. Регулировка рабочей температуры в режимах РАСК

Для изменения текущего значения температуры используйте круговой регулятор. Установите требуемое значение температуры в пределах от 80°C до 120°C с шагом 10°C.

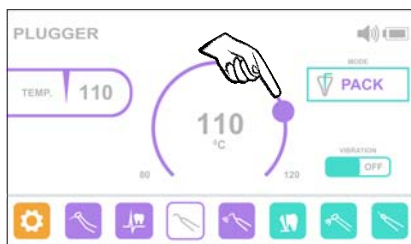

Шаг 4. Индикация в режиме нагрева и охлаждения термоплаггера




В режиме нагрева и охлаждения термоплаггера на экране «Estus Multi» отображается шкала текущей температуры.



При нагреве шкала температуры закрашивается **ОРАНЖЕВЫМ** цветом, при охлаждении - **СИРЕНЕВЫМ**




Шаг 5. Предупреждающие индикаторы

Индикатор	Описание
	Отображается в режиме нагрева термоплаггера
	Отображается в режиме охлаждения термоплаггера
	Термоплаггер не установлен, неисправен или установлен неоригинальный термоплаггер. Установите или замените термоплаггер

6. РАБОТА ИНЖЕКТОРА «ESTUS FILL» С «ESTUS MULTI (PLUS)»

Шаг 1. Активация режима «INJECTOR» на Estus Multi

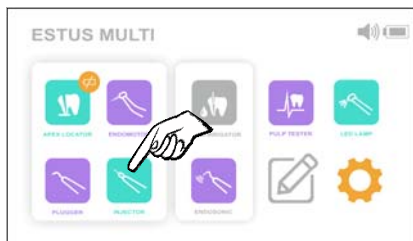

Шаг 1.1. Ручная активация


Нажмите на иконку «INJECTOR» (ИНЖЕКТОР) в главном меню «ESTUS MULTI»

Шаг 1.2. Автоматическая активация

Нажмите на кольцевую кнопку наконечника «Estus Fill». На экране «ESTUS MULTI» автоматически активируется рабочий режим инжектора.



Шаг 2. Выбор скорости подачи гуттаперчи

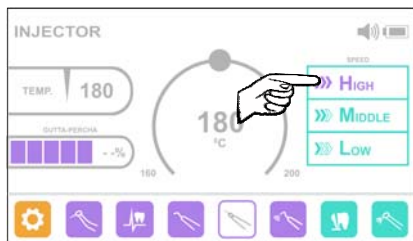

Нажмите на окно «SPEED» (СКОРОСТЬ) и в раскрывшемся списке выберите один из трех уровней скорости: «HIGH», «MIDDLE», «LOW».

Шаг 3. Регулировка рабочей температуры

Для изменения текущего значения температуры используйте круговой регулятор. Установите требуемое значение температуры в пределах от 160°C до 200°C с шагом 10°C.




Шаг 4. Индикатор уровня остатка гуттаперчи

Индикатор “GUTTA-PERCHA” (ГУТТАПЕРЧА) отображает остаток гуттаперчи в гильзе нагревателя в процентах от исходной длины гуттаперцевого стержня.

При показаниях индикатора от 6 до 15% рекомендуется заблаговременно установить в гильзу новый гуттаперцевый стержень.

При показаниях $\leq 5\%$ - новый гуттаперцевый стержень необходимо установить в гильзу.

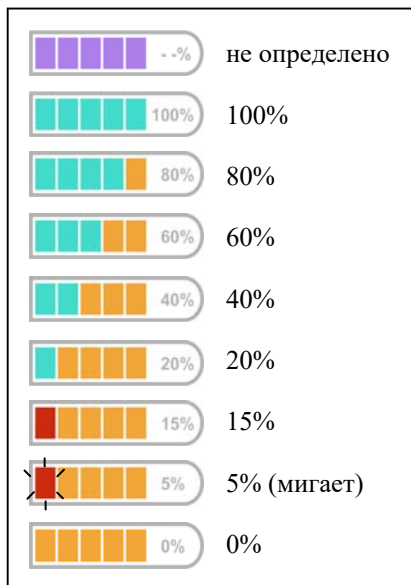

Шаг 5. Индикация в режиме нагрева, инъекции и охлаждения гуттаперчи






В режиме нагрева и охлаждения гуттаперчи на экране «Estus Multi» отображается шкала текущей температуры. При нагреве шкала температуры закрасивается **ОРАНЖЕВЫМ** цветом, при охлаждении - **СИРЕНЕВЫМ**



Во время инъекции гуттаперчи изменяются показания на индикаторе «GUTTA-PERCHA» (см. Шаг 4)

Шаг 6. Предупреждающие индикаторы


Индикатор	Описание
	Отображается в режиме нагрева гуттаперчи
	Отображается в режиме охлаждения гуттаперчи
	Проблема с нагревателем, инъекторной иглой или мотором. Подробнее см. Таблицу «Перечень возможных ошибок (неисправностей) при работе с наконечником «Estus Fill»» в Руководстве по эксплуатации для аппарата для obturации «Estus Pack-Fill»

7. РАБОТА ПУЛЬПТЕСТЕРА «ESTUS PULP» С «ESTUS MULTI (PLUS)»

Шаг 1. Активация режима «PULPTESTER» на Estus Multi


Шаг 1.1. Ручная активация

Нажмите на иконку «PULPTESTER» (ПУЛЬП-ТЕСТЕР) в главном меню «ESTUS MULTI»

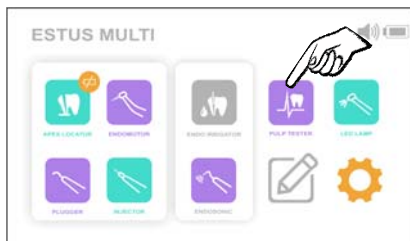

Шаг 1.2. Автоматическая активация


Нажмите на кольцевую кнопку наконечника «Estus Pulp». На экране «ESTUS MULTI» автоматически активируется рабочий режим пульпестера.

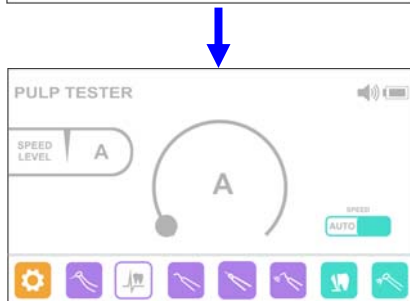


Шаг 2. Изменение скорости нарастания диагностического тока

По умолчанию в программе установлен режим автоматического изменения скорости нарастания диагностического тока (Auto) во всем диапазоне значений.

Для изменения скорости нарастания тока:

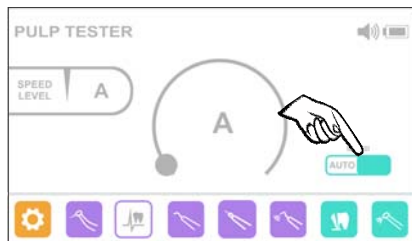


А) переведите переключатель SPEED (СКОРОСТЬ) в положение «SET», для возврата к авторежиму - в положение «AUTO»

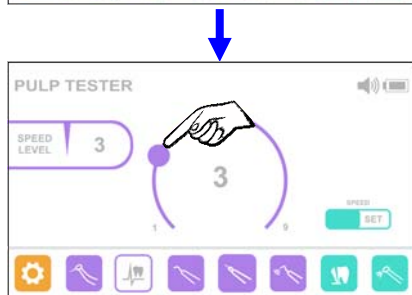

Б) С помощью кругового регулятора установите один из девяти уровней скорости нарастания тока, где:
1 - минимальная скорость,
9 - максимальная скорость


Шаг 3. Индикация в процессе проведения диагностики

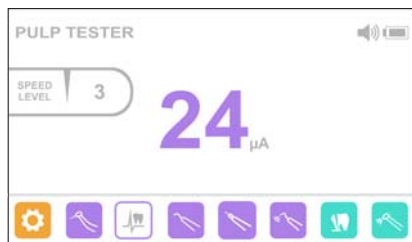




В процессе проведения диагностики на экране «Estus Multi» отображается текущее значение диагностического тока от 01 до 80 мкА

После окончания процедуры на экране индицируется результат

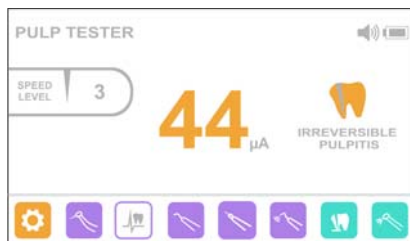диагностики с предположительным диагнозом. Все варианты предположительных диагнозов представлены в таблице ниже




Индикатор на дисплее	Значение «диагност.» тока	Предположительный диагноз
	02 – 09 мкА	HEALTHY (Интактный зуб)
	10 –24 мкА	REVERSIBLE PULPITIS (Обратимый пульпит)
	25 –44 мкА	IRREVERSIBLE PULPITIS (Необратимый пульпит)
	45 –80 мкА	POSSIBLE PULP NECROSIS (Возможен некроз пульпы)

8. РАБОТА ФОТОАКТИВАТОРА (ЛАМПЫ) «ESTUS LIGHT» С «ESTUS MULTI (PLUS)»


Шаг 1. Активация режима «LED LAMP» на Estus Multi

Шаг 1.1. Ручная активация

А) Нажмите на иконку «LED LAMP» (ЛАМПА) в главном меню «ESTUS MULTI»

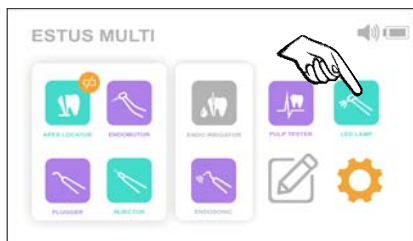

Б) Нажмите на окно «TIP» (НАСАДКА) и в раскрывшемся списке выберите нужный рабочий режим, соответствующий типу подсоединенной насадки к наконечнику «ESTUS LIGHT » - BLUE, RED, ORANGE или LUMI

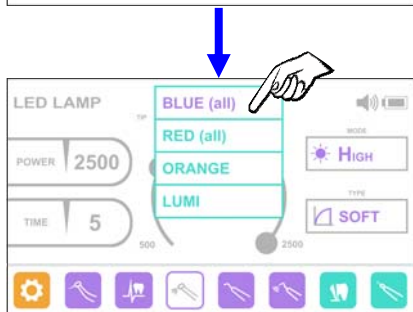

Шаг 1.2. Автоматическая активация

Нажмите на кольцевую кнопку наконечника «Estus Ligh». На экране «ESTUS MULTI » автоматически активируется рабочий режим фотоактиватора.

Шаг 2. Выбор рабочего режима



Нажмите на окно «MODE» (РЕЖИМ) и в раскрывшемся списке выберите один из четырех рабочих режимов: «High», «Middle», «Low» или «Favorite».

Режимы «High», «Middle», «Low» полностью соответствуют режимам работы фотоактиватора H, M, L при его автономной работе (подробнее см. Руководство по эксплуатации для

фотоактиватора «Estus Light»). Изменение рабочих параметров в данных режимах НЕВОЗМОЖНО.

Режим «Favorite» (☆) является дополнительным режимом, в котором пользователь может задать собственные параметры работы для каждого типа насадок.

Шаг 3. Работа с насадками типа «BLUE» и «RED»

Шаг 3.1. Регулировка энергетической светимости излучателя в режиме Favorite


Для изменения текущего значения энергетической светимости излучателя нажмите на кнопку «POWER» (МОЩН.) и с помощью кругового регулятора установите требуемое значение светимости в пределах от 500 до 2500 мВт/см² с шагом 500 мВт/см²



для насадок типа «BLUE» или в пределах от 300 до 1500 мВт/см² с шагом 100 мВт/см² для насадок типа «RED».

Шаг 3.2. Регулировка времени экспозиции в режиме Favorite

Для изменения текущего значения времени экспозиции нажмите на

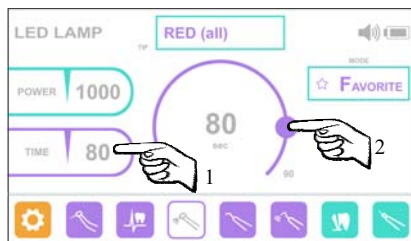

кнопку «**TIMER**» (**ВРЕМЯ**) и с помощью кругового регулятора установите требуемое значение времени в пределах от 5 до 20 сек с шагом 5 сек. для насадок типа «**BLUE**» или в пределах от 30 до 90 сек. с шагом 10 сек. для насадок типа «**RED**».

Шаг 3.3. Выбор типа излучения в режиме Favorite (только для насадок типа «**BLUE**»)



Нажмите на окно «**TYPE**» (**ТИП**) и в раскрывшемся списке выберите один из трех типов излучения: «**NORM**», «**SOFT**» или «**PULSE**», где:



NORM - «**Нормальный**» режим. Заданная энергетическая светимость фотоактиватора постоянна на протяжении всего цикла полимеризации.



SOFT - Режим «**Мягкий старт**». Энергетическая светимость фотоактиватора плавно увеличивается до заданного значения в течение первых нескольких секунд от начала экспозиции, а затем постоянна.




PULSE - «**Импульсный**» режим. Энергетическая светимость фотоактиватора изменяется импульсно с частотой 2 Гц от максимального (заданного) значения до минимально допустимого на протяжении всего цикла полимеризации.

Шаг 3.4. Индикация в режиме излучения фотоактиватора

При работе с насадками типа «**BLUE**» или «**RED**» во время

излучения фотоактиватора на экране «Estus Multi» отображается оставшееся время экспозиции до момента автоотключения фотоактиватора.

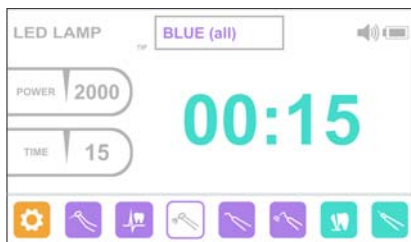

Шаг 4. Работа с насадками типа «ORANGE» и «LUMI»

Шаг 4.1. Регулировка уровня яркости излучения в режиме Favorite


Для изменения текущего уровня яркости излучения используйте круговой регулятор. Установите один из девяти уровней яркости, где:

1 - минимальная яркость,
9 - максимальная яркость.




Шаг 4.2. Индикация в режиме излучения фотоактиватора

При работе с насадками типа «ORANGE» или «LUMI» во время излучения фотоактиватора на экране «Estus Multi» отображается текущее время экспозиции от момента запуска фотоактиватора.

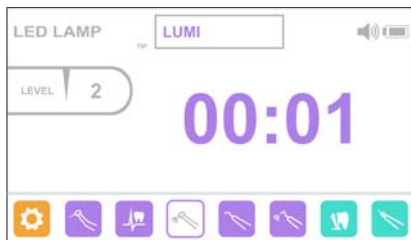

9. РАБОТА ЭНДОСКАЛЕРА «ESTUS SONIC» С «ESTUS MULTI (PLUS)»


Шаг 1. Активация режима «ENDOSONIC» на Estus Multi

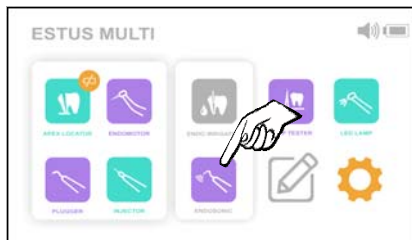

Шаг 1.1. Ручная активация

А) Нажмите на иконку «ENDOSONIC» (ЭНДОСКАЛЕР) в главном меню «ESTUS MULTI»

Б) Нажмите на окно «TIP» (НАСАДКА) и в раскрывшемся списке выберите нужный рабочий режим, соответствующий типу подсоединенной насадки к наконечнику «ESTUS SONIC» - Ni-TI или STEEL

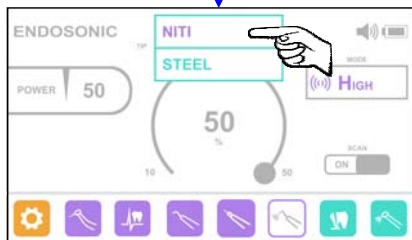

Шаг 1.2. Автоматическая активация

Нажмите на кольцевую кнопку наконечника «Estus Sonic». На экране «ESTUS MULTI» автоматически активируется рабочий режим эндоскалера.

Шаг 2. Выбор рабочего режима

Нажмите на окно «MODE» (РЕЖИМ) и в раскрывшемся списке выберите один из четырех рабочих режимов: «High», «Middle», «Low», «Off».

«Low» или «Favorite».



Для активации режима «High+SCAN» (с функцией сканирования частот), находясь в основном режиме «High» переведите переключатель SCAN (СКАН) в положение «ON», для возврата к режиму «High» (без сканирования) - в положение «OFF»

Режимы «High+SCAN», «High», «Middle», «Low» полностью соответствуют режимам работы

эндоскалера H-SCAN, H, M, L при его автономной работе (подробнее см. Руководство по эксплуатации для эндодонтического ультразвукового скалера «Estus Sonic»). Изменение рабочих параметров в данных режимах НЕВОЗМОЖНО.

Режим «Favorite» (☆) является дополнительным режимом, в котором пользователь может самостоятельно задать значение ультразвуковой мощности из предусмотренного диапазона для каждого типа насадок.

Шаг 3. Регулировка ультразвуковой мощности скалера в режиме Favorite

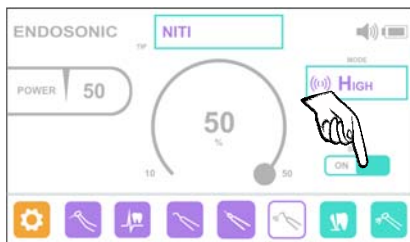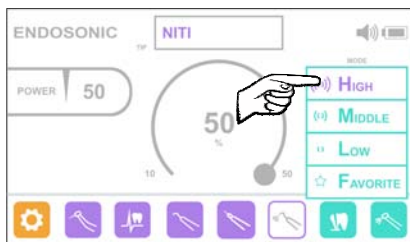



Для изменения текущего значения мощности эндоскалера используйте круговой регулятор. Установите требуемое значение мощности в пределах от 10 до 50% от

максимально возможного значения ультразвуковой мощности эндоскалера для насадок типа «Ni-Ti» или в пределах от 20 до 100% - для насадок типа «STEEL». Шаг регулировки в обоих случаях - 10%


Шаг 4. Индикация в режиме работы эндоскалера

Во время работы эндоскалера на экране «Estus Multi» отображается оставшееся время работы аппарата до момента его автоотключения




10. РАБОТА АПЕКСЛОКАТОРА «ESTUS APEX» С «ESTUS MULTI (PLUS)»

Шаг 1. Активация режима «APEXLOCATOR» на Estus Multi

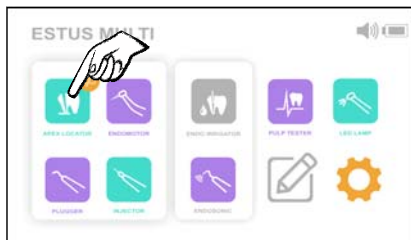

Шаг 1.1. Ручная активация

А) Нажмите на иконку «APEXLOCATOR» (АПЕКСЛОКАТОР) в главном меню «ESTUS MULTI»

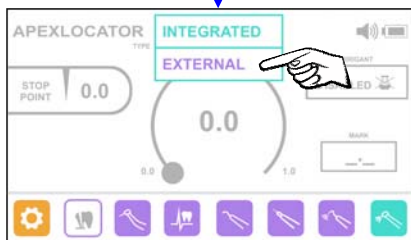

Б) Нажмите на окно «TYPE» (ТИП) и в раскрывшемся списке выберите тип апекслокатора «EXTERNAL» (ВНЕШНИЙ)

Шаг 1.2. Автоматическая активация

Замкните измерительную цепь апекслокатора «Estus Apex». На экране «ESTUS MULTI» автоматически активируется рабочий режим внешнего апекслокатора.

Шаг 2. Настройка и индикация

Все дальнейшие настройки рабочих параметров апекслокатора и индикация в процессе измерений аналогичны настройке и индикации встроенного апекслокатора «Estus Multi» (*подробнее*

см. Руководство по эксплуатации апекслокатора «Estus Multi (Plus)»

11. СОХРАНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ НАСТРОЙКИ

Все настройки аппаратов стоматологического комплекса «Estus», заданные с помощью сопряженного блока управления «Estus Multi (Plus)», автоматически сохраняются в памяти аппаратов при установке беспроводной связи между изделиями и остаются неизменными при отключении или отсутствии «Estus Multi (Plus)» - в автономном режиме работы изделий.

Для возврата к заводским настройкам аппаратов используйте соответствующую функцию индивидуально для каждого изделия (*см. Руководства по эксплуатации для данного изделия - Шаг. Возврат к заводским настройкам*) или функцию «Заводские настройки» в блоке управления «Estus Multi (Plus)» (*см. Руководства по эксплуатации для Estus Multi (Plus) - Шаг.12 Общие настройки изделия/ 12.5 Настройка «Заводские настройки»*).


АО «Геософт Дент»
(Россия)



ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:
129090, г. Москва,
вн. тер. г. Муниципальный округ Мещанский,
пер.Васнецова, д.7

ТЕЛ./ФАКС: +7(495) 663-22-11,
Web: www.geosoft.ru

версия от 11.01.22

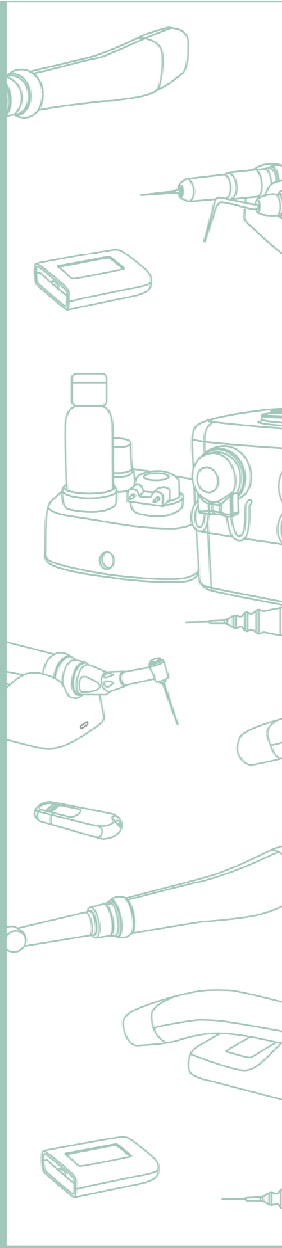

CE



DENT
GEOSOFT